

Injetora de contraste

SinoMRI-BP

REGISTRO ANVISA: 80207450008


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Características funcionais

Seringas:	63 ml
Programação de incrementos:	0,1 ml
Taxa de injeção:	0,1-10 ml/s
Limite de pressão:	50-300 psi
Protocolos de injeção:	120
Fases de injeção:	8
Atraso de injeção e varredura:	0-900s
Console remoto:	<ul style="list-style-type: none"> • 12,1" • LCD colorido • Sensível ao toque
Interface gráfica:	Sim
Teclado físico:	Sim
Software em português:	Sim
Protocolos editáveis:	Sim
Injeção de fluxo duplo:	As seringas A e B podem injetar simultaneamente de acordo com uma proporção definida
Função de aspiração automática:	Sim, de acordo com a quantidade definida pelo operador
Status de injeção da seringa:	Exibido em tempo real
Controle de pressão:	Exibido em tempo real
Parada automática de injeção:	Sim, ao exceder a pressão limite, exibe um aviso no console e dispara alarme sonoro

1. Seringas angiográficas
2. Display e teclado
3. LEDs indicadores de operação
4. Braço suporte
5. Suporte para copo de descarte
6. Eixo vertical
7. Base
8. Rodas
9. Caixa de controle principal
10. Console remoto

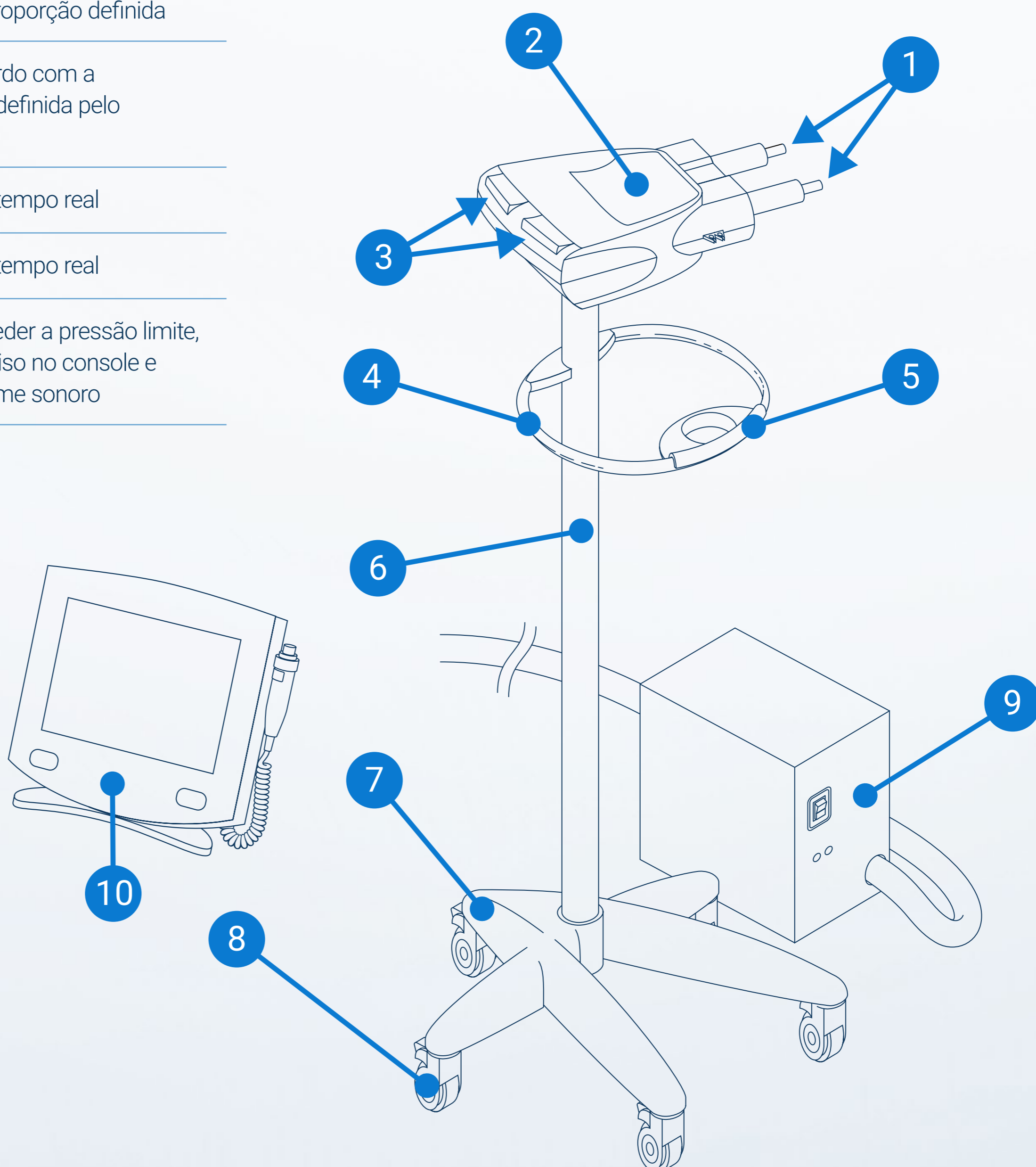

Função e botão teste de injeção:	Verificação de acesso
Função KVO (Keep Vein Open):	Mantém a veia aberta para evitar a obstrução do cateter (somente durante modo "pause" e "atrasos")
Confirmação de exaustão de ar:	Solicita a confirmação da retirada de ar do sistema
Função HOLD:	Pausa o protocolo de injeção sem limite de tempo
LED:	Sinaliza os diferentes estados da injetora
Módulo de comunicação com o console remoto:	Cabo de 30m de fibra óptica
Notificação de bateria baixa:	Quando a tensão da bateria for inferior a 14.2V±0.3V
Tensão de alimentação:	100V-240V AC
Frequência:	50/60Hz
Capacidade da bateria:	7800mAh
Autonomia da bateria:	aproximadamente 5h30
Tempo de recargada bateria:	aproximadamente 3h30

**Fale conosco e saiba mais sobre
configurações e acessórios opcionais**

Produzido por:



MATRIZ

Sino Medical-Device Technology Co.,Ltd
6th Floor, Building 15, No.1008, Songbai Road, Nanshan
District, Shenzhen, P.R. China
Zip: 518055

Tel.: +86 13 588 327 717 | Fax.: +86 18 658 885 845
E-mail: info@sinomdt.com

www.sinomdt-global.com

Importado e distribuído por:



MATRIZ

Rua Lídio Oltramari, 1796, Fraron,
Pato Branco, Paraná, Brasil
CEP 85503-381

Tel.: +55 46 3224-7700
E-mail: contato@1000medic.com.br

www.1000medic.com.br